


Overview & Quick Reference Guide

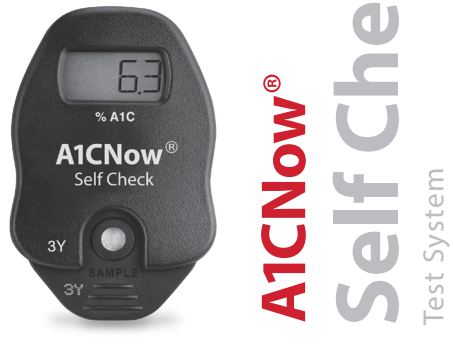

Note: All instances of the box or pouches in this insert are representative ONLY. Please refer to the packaging included with your specific kit.

1-877-870-5610 (toll-free) or +1-317-870-5610 (direct) We invite you to call us and we will guide you through the test.

IMPORTANT! FIRST, we strongly recommend you read all instructions carefully and watch the brief instructional video in our website at ptsdiagnostics.com. THEN, follow all steps as you perform the test.

Match Lot Numbers Use analyzer only with the materials included in the original kit. The analyzer will display "001L" if another test cartridge is inserted.

1 Open Plastic Shaker Pouch\* Do NOT open foil cartridge pouch until Step 6.

2 Stick Finger Wash hands with clean alcohol and dry before testing.

3 Collect Blood Dipper of cartridge in top of blood drop to fill. Make sure collector is adequately filled.

4 Insert Blood Collector Fully insert blood collector into shaker body. Push hard while twisting to fully insert.

5 Mix Shake vigorously 6-8 times (about 5 seconds). This will mix the blood with the solution.

6 Open Foil Cartridge Pouch\* AFTER Blood Collection Insert cartridge into analyzer immediately and use within 2 minutes.

7 Insert Cartridge "Click" test cartridge into place. Analyzer and test cartridge codes must match.

8 Prepare Shaker Remove shaker base. Wipe tip of shaker to be dry.

9 Dispense Sample into Cartridge Ensure analyzer is on level surface. Push down completely to dispense diluted sample and remove it in a continuous motion.

10 5 Minutes to Results Display counts down. QC read. Result. 4 tests left.

11 Dispose of Cartridge/ Save Analyzer Record your test progress here, and bring this with you when you see your doctor.

Result Interpretation Do not take any decision of medical relevance without first consulting your healthcare practitioner.

Überblick & Kurzanleitung



Hinweis: Jegliche Abbildungen in diesem Blatt, die die Box oder die Beutel zeigen, dienen NUR ZUR VERANLEHNUNG ZU Darstellungszwecken. Richten Sie sich daher nach den jeweiligen Verpackungen ihrer entsprechenden Sets.

1-877-870-5610 (gebührenfrei in USA und Kanada) oder +1-317-870-5610 (Direktwahl) Sie dürfen uns gern anrufen und wir führen Sie durch den Test.

WICHTIG! ZUMACHTEN empfehlen wir Ihnen dringend, alle Anweisungen sorgfältig durchlesen und das kurze Lehrvideo auf unserer Website unter ptsdiagnostics.com anzusehen.

Übereinstimmung der Chargennummern Verwenden Sie das Analysegerät ausschließlich mit dem im Originalset enthaltenen Material.

1 Shaker-Kunststoffbeutel öffnen\* Öffnen Sie den Folien-Patronenbeutel ERST bei Schritt 6.

2 In den Finger stechen Verwenden Sie den Test-Hilfs-Stecker und Alkohol reinigen und abtrocknen.

3 Blut entnehmen Drehen Sie mit der Blutenahmeverrichtung vorsichtig das Blutpipetten, um dessen Aufnahme zu erleichtern.

4 Blutenahmeverrichtung einführen Stecken Sie die Blutenahmeverrichtung vollständig in den Shaker ein.

5 Mischen Schütteln Sie 6-8 Mal kräftig (etwa 5 Sekunden lang). Dadurch wird das Blut mit der Lösung vermischt.

6 Öffnen Sie den Folien-Patronenbeutel\* NACH der Blutentnahme Führen Sie die Patrone sofort in das Analysegerät ein und verwenden Sie sie innerhalb von 2 Minuten.

7 Patrone einsetzen Führen Sie die Testpatrone ein, bis ein „Klicken“ zu hören ist.

8 Shaker vorbereiten Nehmen Sie die Basis vom Shaker ab. Wipe tip of shaker to be dry.

9 Probe in die Patrone abgeben Schütten Sie sicher, dass sich das Analysegerät auf einer ebenen Fläche befindet.

10 Ergebnisse in 5 Minuten Display zeigt abnehmende Zeit und Kennzahl. QC-Testergebnis. Ergebnis. 4 Tests verbleibend.

11 Entsorgung der Patrone/ Aufbewahrung des Analysegeräts Sie können die Patrone im Hausmüll entsorgen.

Protokoll-Ergebnis Zeichnen Sie Ihren Fortschritt hier auf. Erläutern Sie Ihre A/C-Ergebnisse hier und nehmen Sie diese zum Termin bei Ihrem Arzt mit.

Présentation et guide de référence rapide



Remarque: Tous les exemples de boîte ou de sachets sont illustrés à titre indicatif SEULEMENT. Veuillez vous référer à l'emballage inclus avec votre kit spécifique.

1-877-870-5610 (sans frais) ou +1-317-870-5610 (ligne directe) N'hésitez pas à nous contacter, nous vous guiderons tout au long du test.

IMPORTANT! TOUT D'ABORD, nous vous recommandons fortement de lire attentivement toutes les instructions et de regarder la brève vidéo d'instructions sur notre site Web à l'adresse ptsdiagnostics.com.

Faites correspondre les numéros de lot Utilisez uniquement l'analyseur avec le matériel inclus dans le kit d'origine.

1 Ouvrez le sachet en plastique contenant l'agitateur\* Ouvrez PAS le sachet contenant la cartouche avant l'étape 6.

2 Effectuez le prélèvement au doigt Lavez-vous les mains ou nettoyez-les à l'alcool, puis séchez-les avant d'effectuer le test.

3 Recueillir le sang Pressez délicatement le collecteur de sang sur le dessus de la goutte de sang pour le remplir.

4 Insérez le collecteur de sang Insérez entièrement le collecteur de sang dans le corps de l'agitateur.

Mélangez Agitez vigoureusement 6 à 8 fois (environ 5 secondes). Le sang se mélange alors avec la préparation de la cartouche.

6 Ouvrez le sachet contenant la cartouche\* APRÈS le prélèvement de sang Ouvrez immédiatement la cartouche dans l'analyseur et utilisez-la dans les deux minutes.

7 Insérez la cartouche Mettez en place la cartouche de test jusqu'à entendre un déclic.

8 Préparez l'agitateur Retirez la base de l'agitateur. Wipe tip of shaker to be dry.


9 Versez l'échantillon dans la cartouche Assurez-vous que l'analyseur se trouve sur une surface plane.

10 Résultats en 5 minutes Le compte à rebours commence. Résultat du test QC. Résultat. Nombre de tests restants.

11 Jetez la cartouche/ conservez l'analyseur Jetez la cartouche avec vos ordures ménagères.

Interprétation des résultats Ne prenez aucune décision liée à votre santé sans d'abord consulter votre médecin agréé.

Panoramica e guida di riferimento rapido

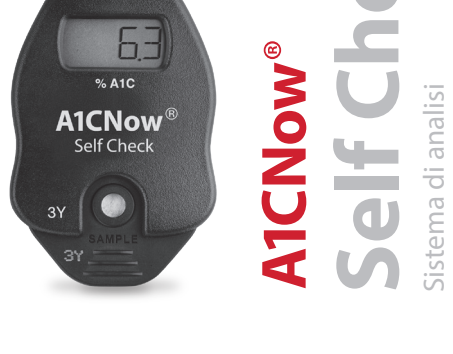

Nota: tutte le istanze relative alla confezione o alle buste presenti in questo foglio illustrativo sono ESCLUSIVAMENTE a scopo rappresentativo. Fare riferimento alla confezione fornita con il kit specifico.

1-877-870-5610 (numero verde) o +1-317-870-5610 (linea diretta) La preghiamo di contattarci: la guideremo durante l'esecuzione del test.

IMPORTANTE! INNANZITUTTO, consigliamo caldamente di leggere con attenzione tutte le istruzioni e di guardare il video illustrativo sul nostro sito Web: ptsdiagnostics.com.

Corrispondenza dei numeri di lotto Utilizzare l'analizzatore soltanto con i materiali inclusi nel kit originale.

1 Apertura della busta in plastica dell'agitatore\* NON aprire la busta in alluminio della cartouche prima del Passaggio 6.

2 Puntura del dito Lavarsi le mani o disinfettarle con alcool e lasciare asciugare prima di eseguire il test.

3 Prelievo di sangue Posizionare delicatamente il raccoglitore sulla goccia di sangue per riempirlo.

4 Inserimento del raccoglitore di sangue Inserire completamente il raccoglitore di sangue nel corpo dell'agitatore.

Miscelare Agitare energicamente 6-8 volte (per circa 5 secondi). In tal modo, il sangue verrà miscelato alla soluzione.

6 Aprire la busta in alluminio della cartouche\* DOPO la raccolta del sangue Inserire immediatamente la cartouche nell'analizzatore e utilizzarla entro 2 minuti.

7 Inserire la cartuccia Inserire la cartouche per test finché non si sente uno scatto.

8 Preparazione dell'agitatore Rimuovere la base dell'agitatore. Wipe tip of shaker to be dry.

9 Erogazione del campione nella cartoucia Assicurarsi che l'analizzatore sia posto su una superficie piana.

10 Attendere 5 minuti per i risultati Questo ciclo di risultati viene visualizzato per 15 minuti e fino all'inserimento della cartoucia per test successiva.

11 Smaltimento della cartuccia/ conservazione dell'analizzatore Smettere la cartoucia assieme ai rifiuti domestici.

Interpretazione dei risultati Non prendere alcuna decisione di carattere clinico senza aver prima consultato il professionista sanitario.



